

LookStation 19 & 22

Manuel d'utilisateur

Traduction Céciaa juin 2012

CECIAA – Tour Gallieni 2 – 36 avenue du général de Gaulle

93170 BAGNOLET - Tel 01.43.62.14.62

Contenu

1. Introduction.....	3
2. Conseils de sécurité.....	3
3. Composants :.....	4
1 - Apparence extérieure :.....	4
2- Contenu de la boîte :.....	5
4. Installation & Préparation	5
5. Utilisation	6
1- On/Off.....	6
2 - Réglages du grossissement	7
3 - Choix des modes d'images	7
4 - Pointeur lumineux	7
5 - Lignage & fenêtrage	8
6 - Réglages de la luminosité et du contraste	8
7 - Débrayage de l'autofocus	8
8 - Gel d'image.....	8
9 - Plateau de lecture	9
10 - Eclairage	9
6. questions/réponses.....	9
7. Caracteristiques techniques.....	10
8. Garantie	10
9. Normes	11
10. Contact / assistance produit.....	11

1. Introduction

Merci d'avoir choisi le LookStation.

Ce manuel va vous aider à profiter au mieux de votre LookStation. Merci de le lire avant d'utiliser votre appareil et de le conserver .

2. Conseils de sécurité

Pour votre sécurité, merci de lire les indications ci-dessous.

Avant la première utilisation :


- 1) Vérifier que l'appareil n'a pas subi de dommage durant le transport. Si vous constatez des dommages, merci de contacter le revendeur. Ne faites aucune tentative de réparation vous-même.
- 2) Le LookStation a été conçu avec des composants de haute qualité, la qualité de votre appareil ne peut être garanti qu'avec des pièces détachées AUMED. L'utilisation de pièces non homologuées par AUMED et les tentatives de réparations par un technicien non autorisé par AUMED annuleront d'office la garantie

Attention :

- 1- Assurez-vous que le produit est placé sur une surface plane et stable.
- 2- Merci de conserver l'appareil dans un endroit sec, sans humidité, à l'abri de la pluie, de la poussière et des températures extrêmes.
- 3- Ne pas stocker le produit près de liquide inflammable
- 4- Ne pas stocker le produit près des radiateurs, ne pas exposer le produit à la lumière du soleil pendant de longue période.
- 5- Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même.
- 6- Les températures recommandées en opération sont 0°C à 40°C
- 7- Ne pas cogner, frapper, choquer, le produit
- 8- Éteignez le produit s'il n'est pas utilisé
- 9- Lorsque vous nettoyez le produit, éteignez le et utilisez la microfibre fournie uniquement. Ne pas utiliser de nettoyant liquide.
- 10- Ne pas brancher l'appareil si le bouton ON/OFF est sur ON
- 11- Ne pas manœuvrer le bras violemment
- 12- Ne pas utiliser d'autre équipement avec la source électrique destinée à l'écran

3. Composants :

1 - Apparence extérieure :

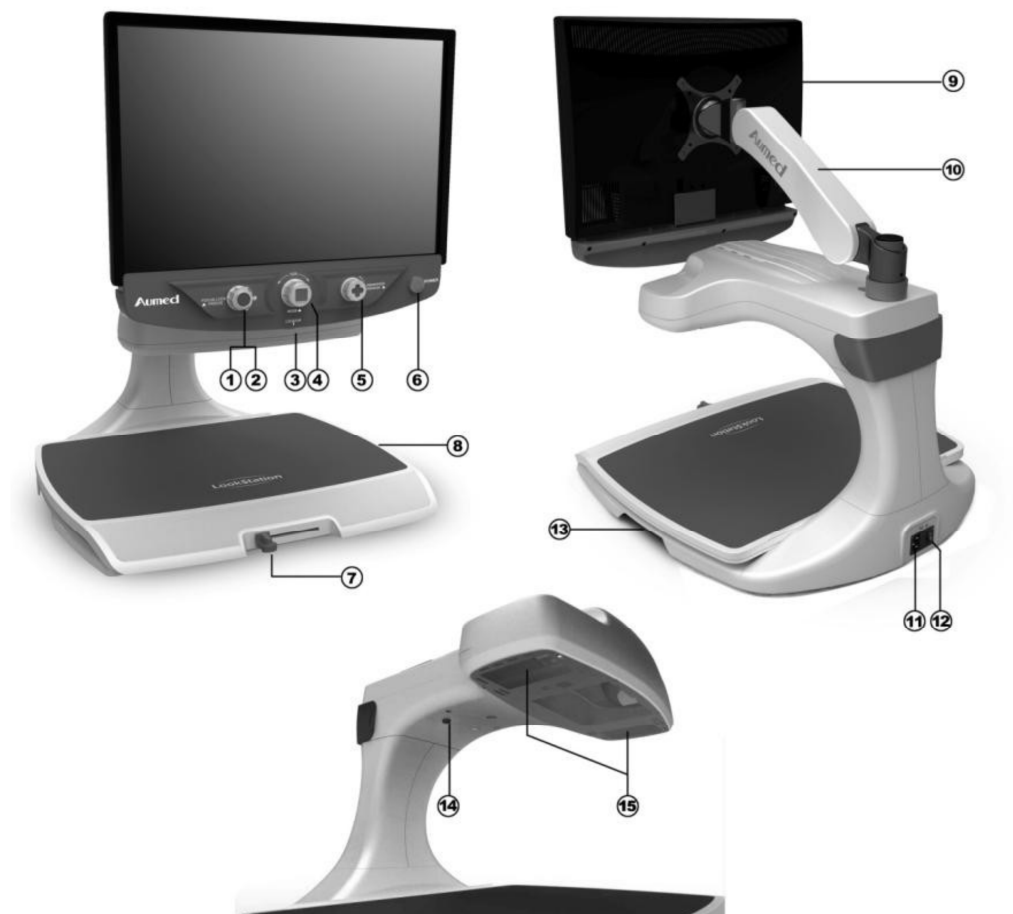

1. Bouton Gel d'image/débrayage de l'autofocus
2. Bouton contraste & luminosité
3. Bouton pointeur lumineux
4. Molette de grossissement et bouton des modes
5. bouton lignage & fenêtrage
6. Bouton d'allumage
7. Frein mécanique
8. Plateau de lecture X-Y
9. moniteur LCD
10. Bras
11. Prise d'alimentation
12. Bouton ON/OFF
13. Poignées de transport
14. bouton d'allumage de l'éclairage
15. Eclairage

2- Contenu de la boîte :

- A. Produit
- B. Microfibre
- C. Manuel
- D. Cordon d'alimentation

4. Installation & Préparation

Comme indiqué sur le dessin ci-dessous : branchez une extrémité à l'appareil et l'autre à la prise murale



5. Utilisation



1- On/Off

Allumage : actionner le bouton ON/OFF est à l'arrière de l'appareil comme indiqué ci-dessous :



Le bouton peut être laissé sur On en permanence. Lorsque l'appareil est connecté et non utilisé, il se met en veille. Appuyer sur le bouton d'allumage à droite du panneau de contrôle, l'appareil et l'éclairage s'allumeront.



Mode veille * : Appuyer sur le bouton d'allumage à droite du panneau de contrôle, l'appareil et l'éclairage s'allumeront. (si le bouton ON/OFF est sur OFF, cette fonction n'est pas active). Si l'appareil est « en veille », appuyer sur le bouton d'allumage, pour le rallumer. Si vous souhaitez le mettre en veille à nouveau, appuyer sur le bouton d'allumage.


Extinction : actionner le bouton ON/OFF sur OFF pour éteindre l'appareil.

* **Economie d'énergie**: Le mode veille a une faible consommation d'énergie. Sous 220V, la consommation est environ 8Wt/Heure.

* **Sécurité** : le mode veille ne présente pas de dangers particulier. Néanmoins, il est recommandé d'éteindre complètement l'appareil avec le bouton ON/OFF, s'il est laissé inutilisé pendant une longue période

2 - Réglages du grossissement

La molette de grossissement est située au centre du panneau de contrôle. Le grossissement peut être ajusté selon le besoin et les images seront grossies ou réduites.

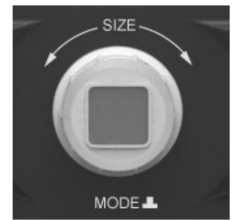

3 - Choix des modes d'images

Le bouton des modes d'image est situé au centre de la molette de grossissement. Lorsque l'on presse ce bouton, 8 modes d'images sont affichés :

- a) Couleurs naturelles
- b) Niveau de gris
- c) texte noir sur fond blanc
- d) texte blanc sur fond noir
- e) texte blanc sur fond bleu
- f) texte jaune sur fond noir
- g) texte jaune sur fond bleu
- h) texte vert sur fond noir

4 - Pointeur lumineux

Le bouton du pointeur lumineux est situé au centre inférieur du panneau de contrôle. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une lumière rouge apparaît sur le plateau. Déplacer le pointeur sur la zone que vous souhaitez lire et elle apparaît sur l'écran.



5 - Lignage & fenêtrage


(Cette fonction n'est pas disponible en mode : couleurs naturelles)

Lorsque l'on presse le bouton lignage & fenêtrage, il s'affiche successivement :

- a) lignage horizontal
- b) fenêtrage horizontal
- c) lignage vertical
- d) fenêtrage vertical

e) pas de lignage et de fenêtrage the screen,

Tourner ce même bouton pour augmenter ou réduire la distance entre les lignes ou les masques

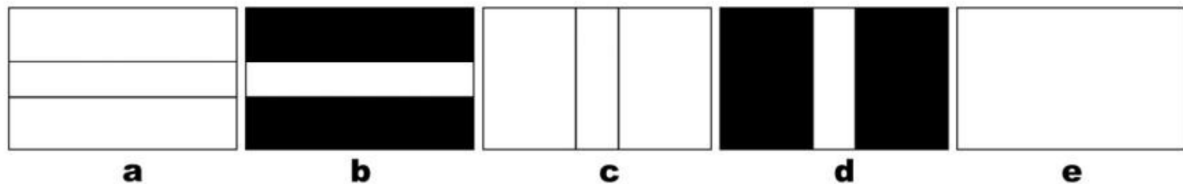


6 - Réglages de la luminosité et du contraste

Le bouton contraste et luminosité permet d'obtenir une image plus lumineuse et plus contrasté.



7 - Débrayage de l'autofocus

Le bouton de débrayage de l'autofocus est situé à gauche du panneau de contrôle. En mode normal, le LookStation fait la mise au point automatiquement. Presser le bouton et le message "Focus Lock" apparait à l'écran la mise au point est forcée sur le plateau. Nous vous suggérons d'utiliser cette fonction pour écrire ou manipuler des objets.

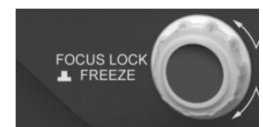

8 - Gel d'image

Presser le bouton pendant 3 secondes pour geler l'image. Appuyer sur le bouton à nouveau pour revenir en mode live.

9 - Plateau de lecture



Figure A



Figure B

Vous pouvez déplacer le text horizontalement et verticalement en depalcant le plateau de lecture XY. Si le frein mécanique est à gauche, le plateau se déplacera librement. Si le frein mecanique est déplacé vers la droite alors le plateau se bloquera.

10 - Eclairage

Le bouton de l'éclairage est situé sous la Caméra, ce bouton permet de régler l'intensite de l'éclairage.

6. questions/réponses

Q: L'image est floue ?

R: verifier si le message "Focus Lock" est affiché à l'écran. Si oui presser le bouton de debrayage de l'autofocus

Q: L'image est sombre ?

R: activer le réglage du contraste et de la luminosité.

7. Caracteristiques techniques

Grossissement : 4X-50X (19 pouces)
4.6X-52X (22 pouces)

Dimension: 515 x 540 x (555~700)mm

Modes:

- a) Couleurs naturelles
- b) Niveau de gris
- c) texte noir sur fond blanc
- d) texte blanc sur fond noir
- e) texte blanc sur fond bleu
- f) texte jaune sur fond noir
- g) texte jaune sur fond bleu
- h) texte vert sur fond noir

température en opération : 0°C ~ 40°C

Humidité maximum toléré en operation: < 85%

8. Garantie

La garantie du LookStation est de 2 ans à la date de la facture. Aumed et ses revendeurs se réserve le droit de reparer ou échanger l'appareil selon les cas.

9. Normes

This product complies with the Safety and EMC requirements of the directives: EMC: EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC: FCC part 15 Class B

This device bears the CE and FCC approval mark.

10. Contact / assistance produit

CECIAA

TOUR GALLIENI 2

36 AVENUE DU GENERAL DE GAULE

93170 BAGNOLET

Tel – 01.43.62.14.62.

Fax – 01.43.62.14.60

Email : service.commercial@ceciaa.com

Service après vente :

CECIAA

26 rue Serpollet

75020 PARIS

Tel – 01.44.69.85.10

Email : sav.logistique@ceciaa.com